



Vbeam[®]

Совершенный
Сосудистый
Лазер



Наука. Результат. Доверие.



SYNERON  CANDELA[®]





“Нет и дня в моей врачебной практике, когда бы я не использовал лазер VBeam Perfecta. Это действительно «рабочая лошадка».”

Brian Zellickson, M.D., Minneapolis, Minnesota

Vbeam®

Опыт и лидерство лазера на красителе

Vbeam Perfecta -золотой стандарт и самый продаваемый лазер на красителе в мире. Неоднократно подтверждается тот факт, что это самый безопасный и простой в использовании инструмент для сосудистых, пигментных и других поражений с низкой

вероятностью возникновения побочных эффектов. Его широкое клиническое применение и выдающаяся производительность делает его лазером «must have» и является правильным вложением денег для любого серьезного дерматолога.





Диаметры пятен

- Широкий выбор диаметров пятен и дистанционных насадок для всех процедур
- 3 x 10, 3, 5, 7, 10 & 12 мм диаметры пятен для сосудистых поражений
- 7 & 10 мм компрессионные насадки для удаления пигментных пятен

Эргономичная рукоятка

- Контурный дизайн снижает нагрузку на запястье и увеличивает комфорт оператора
- Компактный размер и небольшой вес удобны для длительной работы
- Единую быстросъемную дистанционную насадку и картридж выбора пятна легко поменять и очистить
- Микро-чип в дистанционной насадке позволяет системе корректно калибровать лазер



Интуитивный интерфейс

Интуитивный интерфейс пользователя с встроенными пресетами для широкого спектра сосудистых и пигментных поражений, также обеспечивающий простой доступ к настройкам для опытных специалистов.


Вариативность выходной энергии

Vbeam Perfecta обеспечивает полный диапазон выходной энергии для любой длительности импульса на любом диаметре пятна

DCD™ Охлаждение

Запатентованная интегрированная система динамического охлаждения DCD™ сохраняет время, независимо от оператора, связана с флюенсом и обеспечивает последовательную защиту эпидермиса.



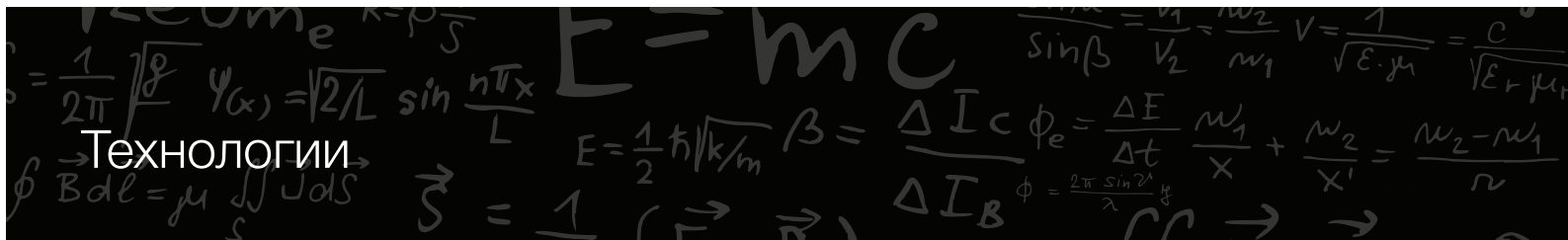

Технологии

“С лазером Vbeam Perfecta врач может удалять пигментные поражения в дополнение к сосудистым проблемам. Возможность лечить и сосудистые и пигментные поражения делает Vbeam очень разносторонним инструментом.”

Jerome Garden, M.D., Chicago, Illinois

Vbeam Все это может

Vbeam Perfecta обладает большими возможностями и большей клинической эффективностью чем любой другой лазер на красителе, Nd:Yag/КТР или IPL система для лечения пигментных и сосудистых поражений. VBeam Perfecta использует технологию 8 микроимпульсов, которая позволяет врачу проводить процедуру с пурпурой или без, увеличивая эффективность лечения или уменьшая длительность восстановительного процесса пациента, когда в этом есть необходимость.

В сравнении с IPL системой, которая также используется для лечения пигмента, Vbeam Perfecta обеспечивает больший комфорт для пациента, делает лечение более эффективным за меньшее количество процедур. Vbeam Perfecta дает отличные результаты в лечении несосудистых поражений, включая бородавки, псориаз, пойкилодерму, стрии, гипертрофические шрамы, акне шрамы. Это также отличный вариант подготовительной процедуры для улучшения результатов от лечения на фракционном лазере.

Клинические показания

- Эффективные процедуры без пурпуры
- Сосудистая сеточка
- Сосуды на носу
- Морщины
- Сосуды на ногах
- Телеангиэктазия
- Пойкилодермия
- Фото-омоложение
- Дисхромия
- Пигментные пятна
- Экхимоз
- Акне
- Сосудистые поражения

Клинические показания с пурпурой

- Винные пятна
- Ангиома
- Шрамы
- Вишневая ангиома
- Гемангиома
- Сосудистое "озеро"
- Бородавки
- Стрии
- Псориаз





Клинические результаты

Пигментные пятна



До



После

Фото: Taro Kono, M.D.

Розацея



До



После

Фото: J. Charlie Finn, M.D.

"Винные" пятна



До



После

Фото: Fine Lines Cosmetic Center

Шрамы



До




После

Фото: Jeffrey S. Dover, M.D.

Морщины




До

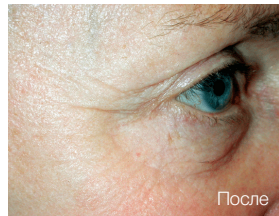


После

Фото: Stephen W. Eubanks, M.D.

Сосуды на лице

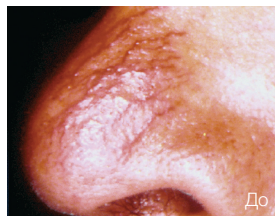

До

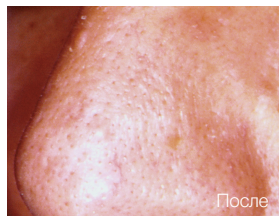

После

Фото: Pablo Bioxeda, M.D.

Пост-операционные синяки



До



После

Фото: Edwin Williams, M.D.





Самый передовой сосудистый лазер

Технические характеристики

Тип лазера	Импульсный на красителе	
Длина волны	595 нм	
Длительность импульса	0.45-40 мс	
Диаметры пятен и максимальная плотность энергии	3 мм - 40 Дж/см ² 5 мм - 30 Дж/см ² 7 мм - 20 Дж/см ² 10 мм - 10 Дж/см ²	12 мм - 7 Дж/см ² 3x10 мм- 25 Дж/см ² 7 мм PL - 15 Дж/см ² 10 мм PL - 10 Дж/см ²
Система доставки	Оптоволокно с оптической насадкой и рукояткой	
Управление импульсом	Кнопка на рукоятке, педаль	
Размеры	109 см x 40 см x 76 см	
Вес	132 кг	
Электрические параметры	230 В 50/60 Гц, 18А, однофазное	
Устройство динамического охлаждения (DCD) Интегрированное управление, контейнер с криогеном		
Криоген	HFC 134a	
DCD Длительность "до"	Интервал 20-100 мс	
DCD Задержка	Интервал 10-100 мс	
DCD Длительность после	Интервал 0-50 мс	





Наука. Результат. Доверие.

Syneron-Candela являются мировыми лидерами на рынке оборудования для эстетической медицины.

Мы одна компания с двумя разными брендами. Мы объединяем наши инновации, знания и понимание потребностей клиента на новом, превосходящем любую компанию в нашей отрасли, уровне.

Финансовая стабильность и большие ресурсы позволяют нашей компании предлагать пользователям широкий портфель доступных продуктов, лучшую мировую организацию службы сервиса и экспансивную всемирную сеть сбыта.

Вместе, мы лучше отвечаем требованиям рынка, чем когда-либо прежде. Мы знаем, как быстро внедрить новые и эффективные продукты для удовлетворения разнообразных потребностей пользователей.

Мы еще сильнее в прогнозировании тенденций рынка, чтобы поддержать наших клиентов и их пациентов. С новыми инновационными технологиями мы сохраним наше глобальное лидерство и продолжим помогать Вам расти в вашей практике.

Офисы Syneron - Candela и сеть дистрибьюторов распространены по всему миру.

SYNERON  CANDELA®

www.syneron-candela.com

