



GentleMax Pro®

Совершенная
Эстетическая
Платформа



Наука. Результат. Доверие.



SYNERON  CANDELA®





“Когда речь идет о создании быстрого и эффективного лазера для удаления волос важен каждый параметр. Две длины волны в аппарате GentleMax Pro позволяют лечить разные категории пациентов. Благодаря самому большому на рынке размеру пятна 24 мм, огромной плотности энергии и вариабельной длительности импульса, GentleMax Pro полностью меняет представление о высокоскоростном лазере для удаления волос.”

Ellen H. Frankel, M.D., Дерматолог и медицинский директор Rejuvaderm Medi Spa

“Большие размеры пятен, ставшие доступными на лазерах серии “Gentle Pro”, значительно снижают время процедуры без ущерба для эффективности, что способствует увеличению потока пациентов и улучшает экономические показатели клиники.”

Alan Gold, M.D., Пластический хирург, F.A.C.S.

GentleMax Pro[®]

Лидер многоволновых систем

Преимущества Pro: Скорость, Эффективность, Многофункциональность

Интегрированная эстетическая платформа GentleMax Pro, обладающая большой скоростью, мощностью, широким спектром клинического применения, предлагает новый подход по сравнению с любой другой системой на рынке.

Совершенная рабочая станция

GentleMax Pro совмещает в себе самые быстрые и мощные alexandritовый (755nm) и неодимовый Nd:YAG (1064nm) лазеры, что позволяет предложить пациенту наиболее полный спектр процедур от удаления волос для всех типов кожи до лечения доброкачественных пигментных и сосудистых поражений, включая сосуды на ногах.

Система доставки импульсов с диаметрами пятен 20/22/24 мм делает GentleMax Pro самой быстрой и эффективной двухволновой системой для эпиляции на рынке.

NEW! Насадка диаметром 5мм позволяет лечить онихомикоз.





“Появление больших размеров пятен на серии Pro вызвало большое количество положительных отзывов, особенно, что касается процедур по удалению волос на спине и ногах. В целом, сочетание высокой энергии и эффективности александритового лазера дает огромное преимущество и выводит на новый уровень продуктивности.”

Anne Chapas, M.D., Медицинский директор Union Square Laser Dermatology
Ассистент профессора клинической дерматологии, Mount Sinai Medical Center

Скорость

Увеличенная до 2 Гц длительность импульса позволяет принимать больше пациентов.

Двухволновая система доставки

Единая легкая и эргономичная система доставки импульсов двух волн 755нм и 1064нм для максимального удобства работы.

Выбор диаметров пятен

Большой выбор диаметров пятен от 1.5 до 24мм позволяет выбрать анатомически обоснованный размер пятна и нужную плотность потока энергии.

Малые диаметры пятен

GentleMax Pro также предлагает двухволновую систему доставки импульсов с диаметрами пятен 1.5 / 3 / 5 / 3x10мм для сосудистых и пигментных поражений.

NEW Насадка диаметром 5мм позволяет лечить онихомикоз.

Большие диаметры пятен

Диаметры пятен 20, 22 и 24мм для двух волн позволяют сократить время проведения процедуры и обеспечить повышенный комфорт для пациента.

Интуитивный сенсорный экран

Помогает легко выбирать и сохранять параметры лечения.

Выбор длительности импульса

Изменяемая длительность импульса обеспечивает превосходные результаты и безопасность при лечении пигментных и сосудистых поражений на различных типах кожи.

DCD или Воздушное охлаждение — Ваш выбор

Выбор между системой воздушного охлаждения Air Cooling Compatible™ (ACC™) и основанной на хладагенте охлаждающей системой динамического охлаждения Dynamic Cooling Device™ (DCD™) экономит время и обеспечивает последовательную защиту эпидермиса.



GentleMax Pro®



Передовые технологии. Впечатляющая мощность. Реальные результаты.

Безусловно, на рынке присутствуют и другие многоволновые системы, но ни одна из этих платформ не может предложить скорость, эффективность и многофункциональность GentleMax Pro. В сравнении с конкурентами легко почувствовать разницу.

Удобный интерфейс пользователя

Легкий интуитивный выбор нужных настроек и безопасных для пациента параметров осуществляется с помощью сенсорного экрана. Режим пошаговой инструкции посредством серии вопросов помогает определить оптимальные параметры для каждого пациента.



Защита эпидермиса

GentleMAX Pro предлагает на выбор несколько вариантов охлаждения кожи — систему охлаждения воздухом (ACC) или с помощью запатентованной интегрированной Динамической Системы Охлаждения (DCD™) с помощью распыления криогена.



Система доставки с большими диаметрами пятен 20/22/24 мм



Клинические результаты

Эпиляция




До



После

Фото: Kathleen P. Hutton M.D.

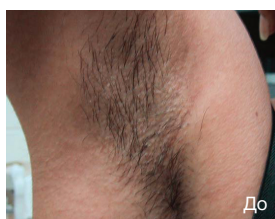


До



После

Фото: Kathleen P. Hutton M.D.

Псевдофолликулез (PFB)

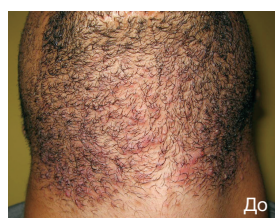


До



После

Фото: Olga Zerpa, M.D.

Удаление пигментных пятен

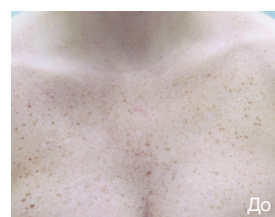

До



После

Фото: Jonathan Crane, D.O.

Сосуды на ногах



До



После

Фото: E. Victor Ross, M.D.

Сосуды на лице



До



После

Фото: Mitch Chasin, M.D.

Клинические показания

- Эпиляция
- Гемангиомы
- Розацея
- Псевдофолликулез (PFB)
- Пигментные пятна
- Сосуды на лице
- Сосуды на ногах
- Диффузная краснота
- Онихомикоз



GentleMax Pro®

Сделайте правильный выбор мультиплатформенной системы

Технические характеристики

Тип лазера	Nd:YAG	Alexandrite
Длина волны	1064 нм	755 нм
Частота	До 10 Гц	До 10 Гц
Максимальная Энергия	80 Дж	53 Дж
Длительность импульса	0.250-100 мс	
Диаметр пятна	6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 15 мм, 18 мм	
Опциональные насадки	1.5 мм, 3 мм, 5 мм, 3 x 10 мм и 20 мм, 22 мм, 24 мм	
Система доставки	Оптоволокно с оптической насадкой и рукояткой	
Управление импульсом	Кнопка на рукоятке, ножная педаль	
Размеры	107 см В x 46 см Ш x 69 см Д	
Вес	118 кг	
Электрические параметры	200-240 В, 50/60 Гц, 30А, 4600 ВА однофазное	

Устройство динамического охлаждения (DCD)

Интегрированное управление, контейнер с хладагентом и рукоятка с дистанционными насадками

Криоген	HFC 134a
Длительность распыления	Интервал: 10-100 мс
Длительность задержки	Интервал: 3, 5, 10-100 мс
Длительность распыления "после"	Интервал: 0-20 мс

Опционально доступна рукоятка с воздушной системой охлаждения (ACC)

Александритовый лазер

Диаметр пятна (мм)	Флюенс (от 0.25 мс до 100 мс)
3	40 to 400 Дж/см ²
3 x 10	10 to 200 Дж/см ²
5	9 to 40 Дж/см ²
6	6 to 150 Дж/см ²
8	6 to 100 Дж/см ²
10	6 to 60 Дж/см ²
12	10 to 40 Дж/см ²
15	7 to 30 Дж/см ²
18	6 to 20 Дж/см ²
20	5 to 16 Дж/см ²
22	4 to 13 Дж/см ²
24	3 to 11 Дж/см ²

Nd:YAG лазер

Диаметр пятна (мм)	Флюенс (от 0.25 мс до 100 мс)
1.5	300 to 520 Дж/см ²
3	130 to 400 Дж/см ²
3 x 10	80 to 300 Дж/см ²
5	9 to 55 Дж/см ²
6	6 to 200 Дж/см ²
8	6 to 150 Дж/см ²
10	6 to 100 Дж/см ²
12	10 to 70 Дж/см ²
15	7 to 44 Дж/см ²
18	6 to 30 Дж/см ²
20	5 to 24 Дж/см ²
22	4 to 20 Дж/см ²
24	3 to 16 Дж/см ²





Наука. Результат. Доверие.

Syneron и Candela являются мировыми лидерами на рынке оборудования для эстетической медицины.

Мы одна компания с двумя разными брендами. Мы объединяем наши инновации, знания и понимание потребностей клиента на новом, превосходящем любую компанию в нашей отрасли, уровне.

Финансовая стабильность и большие ресурсы позволяют нашей компании предлагать пользователям широкий портфель доступных продуктов, лучшую мировую организацию службы сервиса и экспансивную всемирную сеть сбыта.

Вместе, мы лучше отвечаем требованиям рынка, чем когда-либо прежде. Мы знаем, как быстро внедрить новые и эффективные продукты для удовлетворения разнообразных потребностей пользователей.

Мы еще сильнее в прогнозировании тенденций рынка, чтобы поддержать наших клиентов и их пациентов. С новыми инновационными технологиями мы сохраним наше глобальное лидерство и продолжим помогать Вам расти в вашей практике.

Офисы Syneron - Candela и сеть дистрибьюторов распространены по всему миру.

SYNERON  CANDELA®

www.syneron-candela.com

