



eTwo®

Комплексное
омоложение
лица и тела



Complete Skin
Renewal



elōs
results



elōs
safety

SYNERON  CANDELA®



«В своей практике я обнаружил, что процедура **Sublative** предлагает уникальное сочетание абляции и шлифовки кожи, которая способствует уменьшению морщин, подтяжке и даже лифтингу, но при этом время реабилитации несравнимо меньше, чем от традиционных методов шлифовки.

Мои пациенты довольны быстрыми, видимыми результатами, своей сияющей, подтянутой кожей без длительной реабилитации и отрыва от привычной деятельности».

Ами Тауб
Дерматолог, Иллинойс

Постакне & растяжки

Коррекция морщин

Фракционное омоложение

Контурирование лица

eTwo предлагает уникальную комбинацию аппликаторов **Sublime** и **Sublative** для омоложения лица за одну процедуру.

Аппликатор **Sublime** - это сочетание безопасного инфракрасного света и биполярной радиочастоты, что способствует ремоделированию глубоких слоев дермы посредством стимуляции роста нового коллагена.

- Улучшение состояния морщин и овала лица
- Более гладкая кожа
- В основе безопасная и эффективная элос-технология- сочетание энергий, которые стимулируют рост нового коллагена

Аппликатор **Sublative** - фракционная биполярная радиочастота эффективно доставляет энергию в верхние слои эпидермиса, где происходит стимуляция коллагена с минимальным повреждением кожи.

- Улучшение текстуры кожи, акне рубцы, стрии
- Более гладкая, молодая кожа
- Можно использовать на всех типах кожи

Комбинация процедур Sublime и Sublative

Морщины



После 2 процедур
Ruthie Amir, M.D.

Морщины



После 1 процедуры
Brian Biesman, MD

Sublime

Морщины



После 2 процедур
Ruthie Amir, M.D.

Sublative

Стрии




После 1 процедуры
Stephen Bassett, MD

Морщины



После 2 процедур
Ruthie Amir, M.D.

Постакне

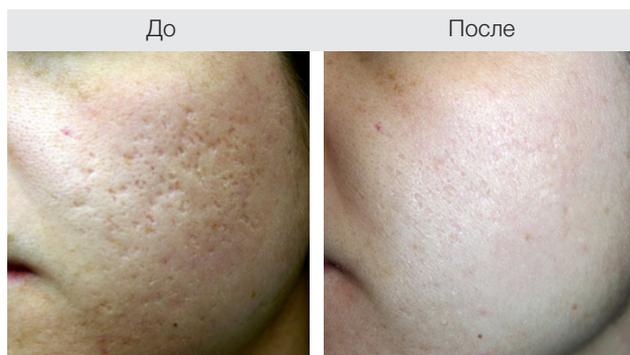

После 3 процедур
Sasha Jazayeri, MD

"Из моей практики, результаты в улучшении текстуры и тона кожи после процедур eTwo, которые я вижу, действительно впечатляют."

Брайан Бисман,
F.A.C.S., Теннесси

eTwo

Видимые результаты уже после первой процедуры
Новый протокол eTwo предлагает сочетание Sublime и Sublative в несколько процедур.

Интуитивный
интерфейс
пользователя

Легкий и
портативный

Одновременное
подключение
2 аппликаторов

Складной
сенсорный 15" экран



Аппликатор Sublime



Аппликатор Sublative RF

Технологии Sublime и Sublative

Sublime и Sublative: разностороннее преимущество

Аппликатор Sublime использует технологию elos - сочетание инфракрасного излучения и биполярной радиочастоты для обеспечения безопасного нагрева глубоких слоев кожи. Нагрев способствует стимуляции выработки коллагена и одновременно сокращению уже имеющегося, позволяя достичь видимых долгосрочных результатов.


Уникальный эргономичный аппликатор Sublative доставляет биполярную радиочастотную энергию через матрицу электродов, расположенную на сменном типе. Фракционное распределение энергии создает микротравмы на поверхности эпидермиса. Организм в свою очередь запускает процесс заживления, минимизируя травматичность. Поверхность, не затронутая абляцией, помогает скорейшему восстановлению всего эпидермиса.




Sublime

1. Неинвазивная процедура для уменьшения морщин
2. elos-технология
3. Быстрая процедура, немедленный видимый результат

Гистология Sublime

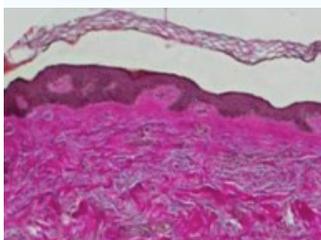

Перед процедурой

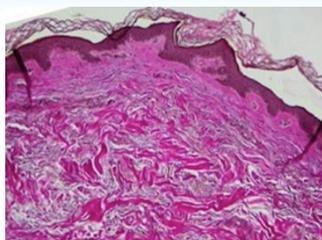


Глубокое ремодулирование дермы через 3 месяца после процедуры




Sublative

1. Новая категория фракционного воздействия
2. Высокая эффективность, малая травматичность
3. Минимальное время реабилитации, доказанная эффективность, удовлетворенность пациентов

Гистология Sublative

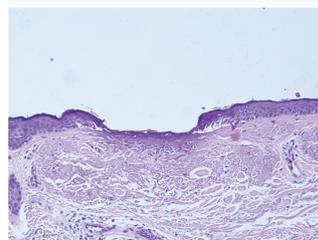

Гистология воздействия одного электрода при Sublative процедуре

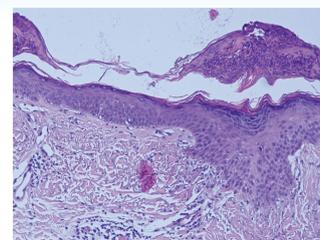

Гистология показывает быстрое заживление и сильное ремоделирование кожи всего через 4 дня после однократной процедуры

Видимые результаты, Короткий период реабилитации

Быстрый возврат инвестиций

Уникальная особенность процедуры: отличные результаты, минимальное время реабилитации и низкая себестоимость процедуры. За последнее время востребованность данной процедуры значительно возросла.

eTwo – Правильный выбор

1. Обладает системой обратной связи и обеспечивает информацию о состоянии кожи в режиме реального времени, измеряет необходимую энергию в каждом импульсе
2. Минимальное время реабилитации, пациенты быстро возвращаются к привычной деятельности
3. Эффективно и безопасно для всех типов кожи
4. Быстрая по времени процедура: время до 1 часа при совмещении Sublime и Sublative в одном протоколе
5. Видимые улучшения после первой процедуры
6. Легкий, компактный, легко транспортируемый



Sublative RF™

Множество протоколов лечения, Исключительные результаты - Радикальное улучшение текстуры и тона кожи, удаление морщин, растяжек и постакне.¹

Насадки (типсы) Sublative iD


1. Интеллектуальный дизайн насадок максимизирует варианты процедур и результаты лечения
2. Ресурс рассчитан на курс лечения
3. Несколько конфигураций типсов

64 пин

1. Быстрое Sublative омоложение всего лица для улучшения текстуры и тона кожи
2. Несколько конфигураций типсов для различных протоколов лечения

44 пин

1. Оптимизированная геометрия электродов для малых зон с фокусом на морщинах в периоральной и периорбитальной зонах
2. Фокус на постакне и морщинах на лбу

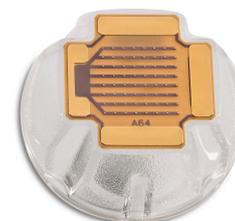


Насадкам Sublative iD 64 пин
100 или 400 импульсов на типс



Насадка Sublative iD 44 пин
200 импульсов на типс

Экран процедуры Sublative RF

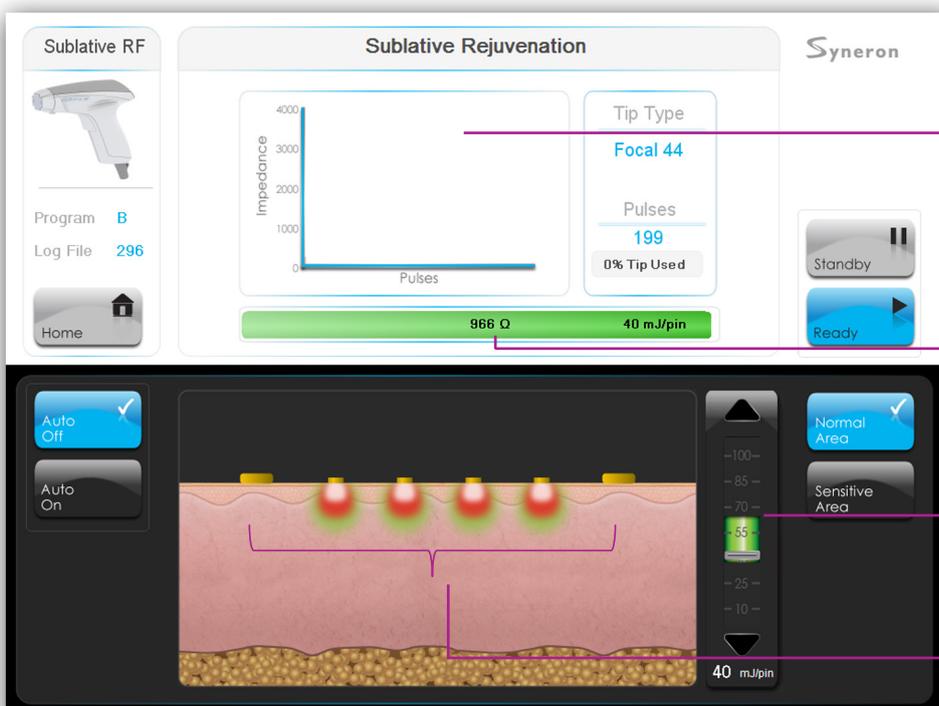

Интеллектуальный график обратной связи

Показывает средний импеданс от импульсу к импульсу

Обратная связь с кожей

Показывает состояние кожи и уровень доставленной энергии

Шкала выбора энергии

С выделенным диапазоном программ

Масштабный паттерн

Показывает глубину и ширину термического повреждения

Технические характеристики

Энергия Sublative RF	До 100 мДж/пин
Размер пятна Sublative RF ID	Стандартный 64 - 12 x 12 мм Фокальный 44 - 11 x 3 мм
Ресурс насадки Sublative RF ID	Стандартный 64 - 400 импульсов Фокальный 44 - 200 импульсов
Энергия Sublime	До 200 Дж/см ³
Размер пятна Sublime	12 x 8 мм
Интерфейс пользователя	15" сенсорный экран
Размеры поверхности стола системы	53 x 30 x 40 см
Вес	8,5 кг
Электрические параметры	100-240 VAC; 3A; 50-60 Hz

eTwo



Syneron-Candela лидер на мировом рынке аппаратов для эстетической медицины.

Мы являемся компанией с двумя различными брендами. Мы объединяем уровень инноваций, профессионализм и понимание запросов клиентов, как ни одна другая компания, работающая в этой области.

Финансовая стабильность позволяет нам предлагать клиентам широкий выбор изделий, лучшую в мире организацию сервиса и доставку нашей продукции по всему миру.

Вместе мы можем реагировать на запросы рынка оперативнее, чем прежде. Мы знаем, как быстро улучшить безопасность и эффективность нашей продукции. Мы строже оцениваем тенденции рынка, чтобы помочь нашим клиентам и их пациентам. Сегодня благодаря новым прорывным технологиям, мы остаемся лидерами на мировом рынке и продолжаем помогать вам в развитии вашей практики.

Syneron-Candela имеет офисы и дистрибьютеров по всему миру.

SYNERON CANDELA®

www.syneron-candela.com