



elōs Plus[®]

Комплексная многофункциональная эстетическая платформа



elōs
безопасность



elōs
результат



multi
функциональность

SYNERON  CANDELA[®]

eĻos PLUS - оптимальное решение для популярных процедур

удаление
морщин

~52 миллиона
пациентов


удаление
шрамов и
рубцов

~17 миллионов
пациентов

лечение
ПИГМЕНТНЫХ
образований

~15 миллионов
пациентов

Процедуры по
удалению
волос

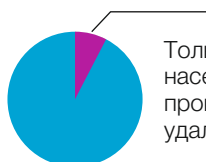

Только 9%
населения делают
процедуры по
удалению волос



52% населения
рассматривают
удаление волос с
помощью эстетических
аппаратов (устройств)

eĻos PLUS - комплексная многофункциональная эстетическая платформа

Многофункциональность

Предлагает полный спектр наиболее востребованных решений в эстетической медицине

eĻos Результаты

Уникальное сочетание оптической и радиочастотной энергии для высокоэффективных результатов

eĻos Безопасность

Лечение подходит для всех типов кожи благодаря повышенным режимам безопасности на многофункциональной платформе Elos Plus

Непревзойденная универсальность

Платформа расширяется по мере расширения вашей эстетической практики



Взаимовыгодное партнерство для
успеха вашей деятельности

Сервисное обслуживание | Маркетинговая
поддержка | Обучение по американским
стандартам | Финансовая поддержка

elōs технология: Это великолепно

elos (электро-оптическая синергия) является революционным прорывом в практике эстетической медицины. elos обеспечивает безопасное и более глубокое проникновение оптической (лазер или импульсный свет) и РЧ энергий.


Объединив эти виды энергий, можно снизить плотность оптической энергии до 60% для более безопасного и комфортного проведения процедур и повышения клинической эффективности.

Как это работает


1. Оптическая энергия избирательно поглощается целевыми тканями и преобразуется в тепловую энергию, предварительно нагревая целевые ткани.

2. Ток высокой частоты проходит между электродами, создавая диффузное нагревание в дермальном слое и вызывая дополнительное тепловое воздействие на целевые ткани.

3. Одновременно, эпидермис охлаждается встроенным сапфировым контактным охлаждением, которое увеличивает сопротивление кожи, дополнительно защищая эпидермис и давая возможность радиочастотной энергии проникнуть глубже в целевые ткани.

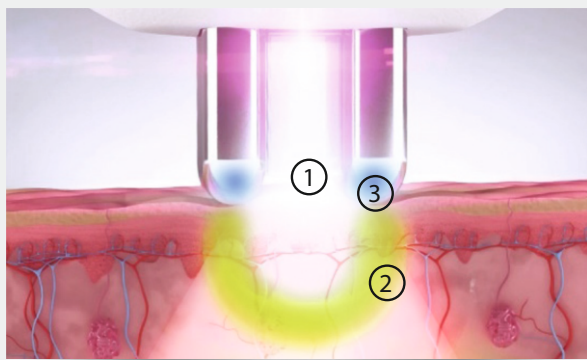

elōs технология это

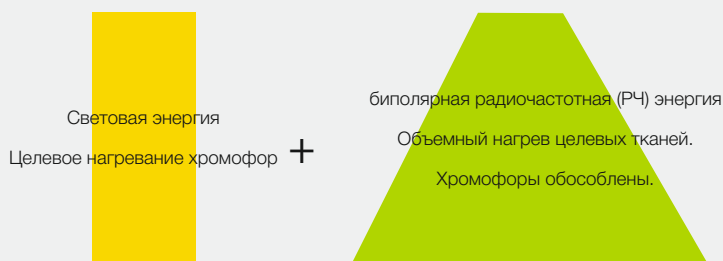

Беспрецедентная безопасность и превосходные результаты



elōs
Безопасность


- ✓ Возможность использовать меньше оптической энергии повышает безопасность процедуры для пациентов с любым типом кожи.
- ✓ Радиочастотная энергия обеспечивает проникновение в глубокие слои дермы для более сильного эффекта по сравнению с применением только оптической энергии.
- ✓ Интеллектуальная система обратной связи (Intelligent Feedback System – IFS) обеспечивает точную подачу РЧ энергии независимо от степени сопротивления кожи.
- ✓ Запатентованная функция Active Dermal Monitoring™ для дополнительной безопасности отслеживает изменения поверхностного сопротивления кожи при каждом импульсе.

Активный мониторинг за кожей

обеспечивает контроль над изменениями сопротивляемости кожи во время прохождения каждого импульса с целью обеспечения дополнительной безопасности.

Во время применения радиочастотной энергии, прибор измеряет изменения сопротивления кожи (ISM - Сопротивление измерения безопасности), показывая изменения температуры тканей. Предельная безопасность сопротивления (ISL) служит пределом разрешенной температуры в дерме, если она вдруг увеличивается во время процедуры.

Активный мониторинг за кожей гарантирует достижения эффективных термических профилей.

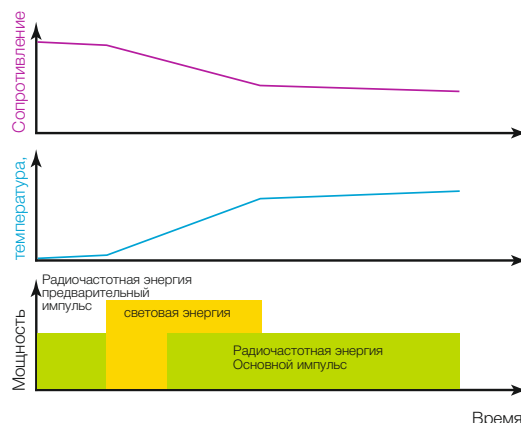



- || Больше количество энергии может достигать цели без риска разрушения эпидермиса
- || Благодаря радиочастотной энергии обеспечивается проникновение в глубокие слои дермы для более сильного эффекта по сравнению с применением только оптической энергии
- || Повышенная селективность и целенаправленность

Новинка!

Trinité Plus – 3 воздействия – 1 протокол

• Все 3 воздействия – омоложение кожи, удаление морщин и неаблятивное фотоомоложение.

• Процедуры выполняются последовательно, в течение одного визита.

• Объединенные elos энергии (световая и биполярной радиочастоты) и технологии фракционной биполярной радиочастоты для полного омоложения.

По результатам исследований, у 80% пациентов наблюдались улучшения после 1 процедуры.



Фотографии: Рути Амир, доктор медицинских наук

SR/SRA для коррекции цвета (фотоомоложения)

- для удаление мелких сосудов и пигментных образований.
- Комбинация Elos энергий (световая + биполярная

радиочастота) воздействует точно на пигментные и сосудистые поражения которые постепенно исчезают.

Согласно результатам исследования, общее улучшение кожи получило высокую оценку среди экспертов.



Фотографии: Медицинский центр СМС

Sublime – для контурного лифтинга и разглаживания морщин

• Sublime предназначен для неинвазивной коррекции морщин, делая кожу более гладкой и выравнивая цвет лица.

• Sublime использует elos сочетание мягкого импульсного ИК излучения (длина волны 700-2000нм) и биполярной РЧ для глубокого нагрева кожи, что стимулирует долгосрочный синтез коллагена, в результате чего быстро повышается упругость кожи на длительный период.

По результатам исследования, у 89% пациентов наблюдалось значительные улучшения после процедур.



Фотографии: Рути Амир, доктор медицинских наук

Sublative для улучшения текстуры кожи

- Для коррекции морщин, устранения рубцов и стрий, пигментации.
- Заметные результаты с минимальным восстановительным периодом.

По результатам исследования, у 100% пациентов наблюдалось значительные улучшения после 3 процедур.



Фотографии: Майкл Голд, доктор медицинских наук

Motif для безболезненного удаления волос

- Сочетание elos энергий (диодного лазера и радиочастоты).
- Новинка! Motif Vantage имеет самый большой размер пятна делая процедуры более быстрыми.

По результатам исследования, у 65% пациентов наблюдалось сокращение волос после 1 процедуры.



Фотографии: Рути Амир, доктор медицинских наук

Лечение Акне

- Сочетание elos энергий (природная фотодинамическая терапия + биполярная радиочастота) воздействует селективно на сальные железы и бактерии.
- РЧ энергия снижает активность сальных желез, а энергия синего цвета одновременно разрушает акне.

По результатам исследования, среднее количество поражений было снижено на 47% после 8 процедур.



Фотографии: Тесс Маурисио, доктор медицинских наук

LV / LVA для лечения сосудистых поражений и варикозного расширения вен

- Уникальная elos комбинация лазерной и РЧ энергий обеспечивает контролируемый селективный термолиз сосудистых поражений, телеангиэктазий и вен на ногах.
- Би-полярная РЧ проходит между двумя электродами насадки, подавая энергию, максимально направленную в целевую зону.

По результатам исследования, 90 % пациентов имели 50-100% улучшения.



Фотографии: Сайрус Чесс, доктор медицинских наук

Создайте ВАШУ систему для ВАШЕЙ Практики
Выбирайте из 15 различных аппликаторов (насадок)



функциональность

[illegible]

«Одним из основных преимуществ elos Plus является ее универсальность. Эта multifunctional платформа имеет 15 различных насадок, которые позволяют сформировать индивидуальный подход к каждому клиенту. Иметь в своем распоряжении полный набор насадок для лица в одной платформе – огромный плюс».

Винс Афсахи, доктор медицинских наук, дерматолог

Премиальная многофункциональная платформа



18 востребованных процедур
15 насадок

Быстрая окупаемость благодаря широкому применению

Премиальная платформа

- ✓ с elos Plus возможно одновременное подключение сразу 3-х насадок
- ✓ Новинка! Улучшенный режим энергопотребления. Видимые результаты всего за 1 процедуру
- ✓ Новинка: Trinity Plus комбинированное лечение
- ✓ Новинка: Motif Vantage для более быстрой диодной лазерной эпиляции
- ✓ Новинка! SRA Mini – идеально подходит для обработки небольших, «труднодоступных» участков

Разработано для безопасности

- ✓ Запатентованная функция Active Dermal Monitoring™ для дополнительной безопасности отслеживает изменения поверхностного сопротивления кожи при каждом импульсе
- ✓ Встроенная система охлаждения кожи сапфировым наконечником обеспечивает защиту эпидермиса и комфорт пациента во время процедуры
- ✓ Интеллектуальная система обратной связи (Intelligent Feedback System – IFS) обеспечивает точную подачу РЧ энергии независимо от степени сопротивления кожи

Удобный интерфейс пользователя

- ✓ Рекомендованные параметры процедур
- ✓ Легкое управление режимами лечения и полный визуальный контроль за ходом процедуры
- ✓ Новый визуальный индикатор подтверждает полный контакт с кожей при каждом импульсе

«Новый дизайн elos Plus и насадки с увеличенным размером пятна дают возможность быстрее проводить процедуры и, соответственно, принять за день больше пациентов. Кроме того, благодаря новому дизайну, возможно значительно уменьшить оптическую энергию, повысив безопасность и комфорт для пациента и обеспечив при этом отличные клинические результаты».

Нимрод Фридман, доктор медицинских наук, пластический хирург.

Параметры лазерного аппарата Elos Plus

Насадка	Спектр	Оптическая энергия		РЧ энергия		Обрабатываемая область	Частота повторения импульсов		Охлаждение
Sublative	N/A	N/A		Up to 100 mJ/pin		Standard 64: 12 x 12 mm Focal 44: 11 x 3 mm	1 Hz		N/A
Sublime	700-2000 nm	Up to 6 W/cm		Up to 200 J/cm		12 x 8 mm	1 Hz		10°C
SR	580-980 nm	Up to 45 J/cm		Up to 25 J/cm		25 x 12 mm	1 Hz		5°C
SRA	470-980 nm	Up to 45 J/cm		Up to 25 J/cm		25 x 12 mm	1 Hz		5°C
AC	400-980 nm	Up to 18 J/cm		Up to 25 J/cm		25 x 12 mm	1 Hz		5°C
LV	915 nm	Up to 140 J/cm		Up to 100 J/cm		8 x 5 mm	1 Hz		5°C
LVA	915 nm	100 - 350 J/cm		Up to 100 J/cm		8 x 2 mm	1 Hz		5°C
SR Plus	580-980 nm	Up to 35 J/cm		Up to 25 J/cm		35 x 14 mm	2 Hz		5°C
SRA Plus	470-980 nm	Up to 35 J/cm		Up to 25 J/cm		35 x 14 mm	2 Hz		5°C
SRA mini	470-980 nm	Up to 35 J/cm		Up to 25 J/cm		15 x 14 mm	1 Hz		5°C
		Импульсный режим J/cm	Режим Motif J/cm	Импульсный режим J/cm	Режим Motif J/cm		Импульсный режим Hz	Режим Motif	
Motif Vantage	810 nm	4 - 30	2 - 5	5 - 30	3 - 8	33 x 14 mm	3	10	5°C
Motif LHR	810 nm	Up to 50	2 - 8	Up to 50	5 - 10	15 x 12 mm	2	10	5°C
Motif HR	680 - 980 nm	Up to 45	2 - 6	Up to 25	3 - 8	25 x 12 mm	3	3	5°C
Motif IR	915 nm	Up to 70	2 - 6	Up to 100	5 - 10	8 x 5 mm	1	10	5°C
Motif HR Plus	680-980 nm	Up to 35	2 - 8	Up to 25	3 - 8	35 x 14 mm	3	3	5°C
вес платформы		40 kg / 88 lbs							
размер платформы (W x D x H)		54 x 52.5 x 140 cm / 21.5 x 22 x 55.2 in.							
Требование к электропитанию		100 - 240 VAC							

Наука. Результат. Доверие.

Syneron-Candela является лидирующей компанией в сфере оборудования для эстетической медицины с широким ассортиментом продукции и глобальным присутствием на рынке.

Представляемые компанией технологии позволяют специалистам предлагать передовые решения для широкого спектра процедур в области эстетической медицины, включая коррекцию фигуры, удаление волос, сокращение морщин, удаление татуировок, улучшение внешнего вида кожи посредством устранения доброкачественных сосудистых образований и нарушений пигментации, лечение акне, заболеваний сосудов ног и устранение целлюлита.

Компания реализует свою продукцию под тремя различными брендами: Syneron, Candela и CoolTouch и обладает широким ассортиментом надежной, лидирующей продукции, включая UltraShape, VelaShape, GentleLase, VBeam Perfecta, PicoWay, Profound и elōs Plus.

Основанная в 1970 году, компания осуществляет продажу, обслуживание и техническую поддержку своей продукции в 86 странах. Ее офисы находятся в Северной Америке, Франции, Германии, Италии, Португалии, Испании, Великобритании, Австралии, Китае, Японии, Гонконге, а дистрибьюторы распределены по всему миру.

Для получения дополнительной информации, посетите сайт в сети Интернет www.syneron-candela.com.

SYNERON  CANDELA®
www.syneron-candela.com

¹Данные о файле

² Собственный опрос клиентов Syneron, 2015

³Перино А. Вульво-вагинальная атрофия: новый метод лечения с использованием фракционного CO2 лазера, основанный на тепловой абляции. Maturitas. март, 2015 г.; 80(3):296-301

⁴Сальваторе С. и соавт. Гистологическое исследование эффективности микроаблятивного CO2 лазера на атрофированную ткань вагинального канала: исследование ex vivo. Мепорause. 20 января 2015 г. [электронная публикация до выхода в печать].

⁵ Клиническое исследование, клиника HM Montepiñe Hospital, Мадрид, Испания, 2015 г.