

GentleLase Pro-U™

Быстрее,
Эффективнее,
Больше
ВОЗМОЖНОСТЕЙ



Наука. Результат. Доверие.



SYNERON  CANDELA®



“Апгрейд многоволновой системы серии Pro-U в двухволновую многофункциональную платформу GentleMax Pro - привлекательная возможность расширить вашу клиническую практику.” Shlomit Halachmi MD, Дерматолог

“Большие размеры пятен, ставшие доступными на серии Gentle Pro значительно снижают время процедуры без ущерба для эффективности, что способствует увеличению потока пациентов и улучшают экономические показатели клиники.”

Alan Gold, M.D., Пластический хирург, F.A.C.S.

GentleLase Pro-U™

Лидирующие технологии

GentleLase Pro-U лазер номер один в индустрии красоты, идеальное решение для удаления волос, пигментных поражений и сосудистых патологий, таких как винные пятна. Быстрый и мощный, обладающий уникальными характеристиками, GentleLase Pro-U обеспечивает результаты, превосходящие ожидания, завоевывает доверие врачей дерматологов во всем мире.

Возможно произвести апгрейд GentleLase Pro-U, расширив тем самым клинические способности аппарата, предлагая новый спектр услуг пациентам.

Диаметры пятен 20/22/24 мм делают GentleLase Pro-U самым быстрым александритовым лазером на планете.





Скорость

Увеличенная до 2 Гц длительность импульса позволяет принимать больше пациентов.

Выбор диаметров пятен

Большой выбор диаметров пятен от 1.5 до 24мм позволяет выбрать анатомически обоснованный размер пятна и нужную плотность потока энергии.

Малые диаметры пятен

GentleLase Pro-U также предлагает двухволновую систему доставки импульсов с диаметрами пятен 1.5 / 3 / 5 / 3x10мм для сосудистых и пигментных поражений.

Большие диаметры пятен

Диаметры пятен 20, 22 и 24мм для двух волн позволяют сократить время проведения процедуры и обеспечить повышенный комфорт для пациента.

Интуитивный сенсорный экран

Помогает легко выбирать и сохранять параметры лечения.

Выбор длительности импульса

Изменяемая длительность импульса обеспечивает превосходные результаты и безопасность при лечении пигментных и сосудистых поражений на различных типах кожи.

DCD or Air Cooling—It's Your Choice

Выбор между системой воздушного охлаждения Air Cooling Compatible™ (ACC™) и основанной на хладагенте охлаждающей системой динамического охлаждения Dynamic Cooling Device™ (DCD™) экономит время и обеспечивает последовательную защиту эпидермиса.


Элегантный, современный дизайн

Прямые линии, современный дизайн, компактность и легкость для повышения мобильности. Обеспечивает быстрые, эффективные и удобные процедуры практически в любых условиях.



GentleLase Pro-U™



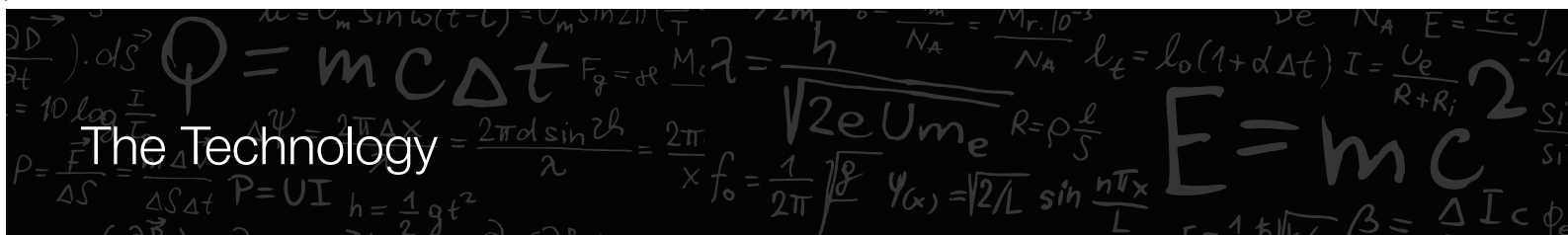

The Technology

“У меня в клинике стоит около 20-30 лазеров, многие из них удаляют волосы, но я все равно делаю это на GentleLase. Я пробовал работать на многих аппаратах, но GentleLase продолжает оставаться лучшим.”

Thomas E. Rohrer, M.D., SkinCare Physicians of Chestnut Hill, Massachusetts

Сделай свою практику более совершенной с помощью Candela

Выбор системы охлаждения

Возможен выбор системы охлаждения – Воздушная (мощный поток холодного воздуха) (ACC) или Динамическая система охлаждения (DCD). Запатентованная Динамическая Система Охлаждения обеспечивает последовательное, низкотемпературное, заданное с определенной частотой, охлаждение – распыление на кожу криогена с возможностью настройки интервала. Уникальный дизайн рукоятки ACC и DCD обеспечивает превосходную видимость в течение всей процедуры. Возможность выбора системы охлаждения на GentleLase Pro-U делает этот аппарат уникальным среди других длинноволновых александритовых лазерных систем.



Система доставки с большими диаметрами пятен 20/22/24 мм





Разнообразие применения GentleLase Pro-U

Пользователи во всем мире используют GentleLase Pro-U не только для эпиляции волос:

- Удаление волос (идеально для I - IV фототипов)
- Удаление эпидермальных пигментных пятен
 - Поврежденная солнцем кожа
 - Возрастные пигментные изменения
 - Веснушки
- Удаление сосудистых патологий

Усовершенствование GentleLase Pro-U

В случае апгрейда лазера GentleLase Pro-U становятся доступными следующие приложения:

- Удаление волос для любого типа кожи
- Сосуды на ногах
- Телеангиэктазия
- Лазерное омоложение (подтяжка) кожи

Клинические результаты

Эпиляция



До



После

Фото: Marcelle C. Kutun, M.D., CME, CLS, CLP



До




После

Фото: M. Ercan, M.D.

Пигментные пятна



До

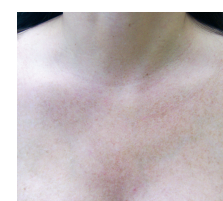

После

Фото: Jonathan S. Crane, D.O.

Сосудистые поражения



До



После

Фото: Christine Dierickx, M.D.



GentleLase Pro-U™

Передовые технологии, Возможность апгрейда

Технические характеристики

Тип лазера	Nd:YAG (опционально)	Alexandrite
Длина волны	1064 нм	755 нм
Частота	До 10 Гц	
Максимальная Энергия	80 Дж	53 Дж
Длительность импульса	0.250-100 мс	
Диаметр пятна	6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 15 мм, 18 мм	
Опциональные насадки	1.5 мм, 3 мм, 5 мм, 3 x 10 мм и 20 мм, 22 мм, 24 мм	
Система доставки	Оптоволокно с оптической насадкой и рукояткой	
Управление импульсом	Кнопка на рукоятке, ножная педаль	
Размеры	107 см В x 46 см Ш x 69 см Д	
Вес	118 кг	
Электрические параметры	200-240 В, 50/60 Гц, 30А, 4600 ВА однофазное	

Устройство динамического охлаждения (DCD)

Интегрированное управление, контейнер с хладагентом и рукоятка с дистанционными насадками

Криоген	HFC 134a
Длительность распыления	Интервал: 10-100 мс
Длительность задержки	Интервал: 3, 5, 10-100 мс
Длительность распыления "после"	Интервал: 0-20 мс


Опционально доступна рукоятка с воздушной системой охлаждения (ACC)


Александритовый лазер

Диаметр пятна (мм)	Флюенс (от 0.25 мс до 100 мс)
1.5	100 to 520 Дж/см ²
3	40 to 400 Дж/см ²
3 x 10	10 to 200 Дж/см ²
5	9 to 40 Дж/см ²
6	6 to 150 Дж/см ²
8	6 to 100 Дж/см ²
10	6 to 60 Дж/см ²
12	10 to 40 Дж/см ²
15	7 to 30 Дж/см ²
18	6 to 20 Дж/см ²
20	5 to 16 Дж/см ²
22	4 to 13 Дж/см ²
24	3 to 11 Дж/см ²

Nd:YAG лазер (опционально)

Диаметр пятна (мм)	Флюенс (от 0.25 мс до 100 мс)
1.5	300 to 520 Дж/см ²
3	130 to 400 Дж/см ²
3 x 10	80 to 300 Дж/см ²
5	9 to 55 Дж/см ²
6	6 to 200 Дж/см ²
8	6 to 150 Дж/см ²
10	6 to 100 Дж/см ²
12	10 to 70 Дж/см ²
15	7 to 44 Дж/см ²
18	6 to 30 Дж/см ²
20	5 to 24 Дж/см ²
22	4 to 20 Дж/см ²
24	3 to 16 Дж/см ²

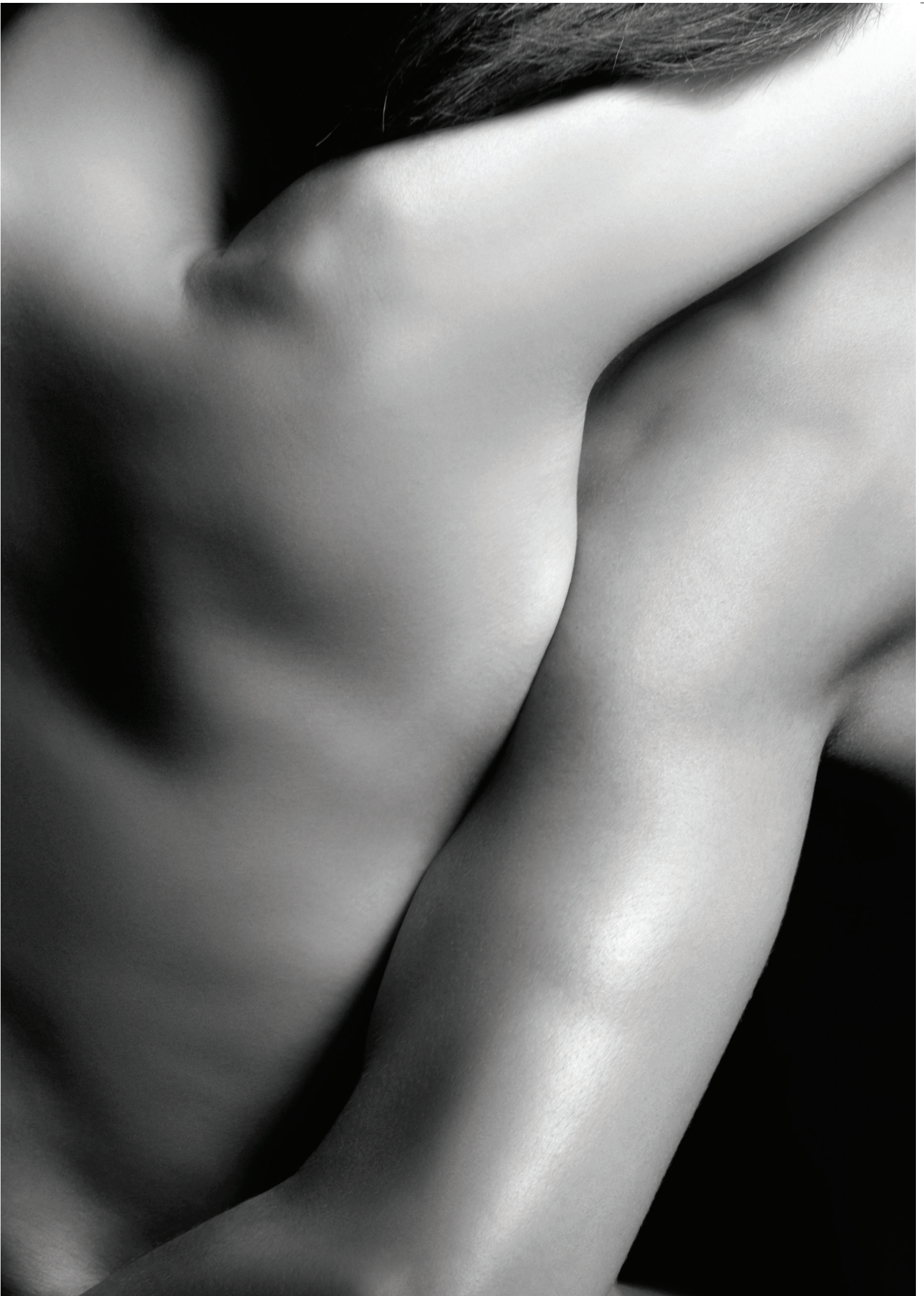

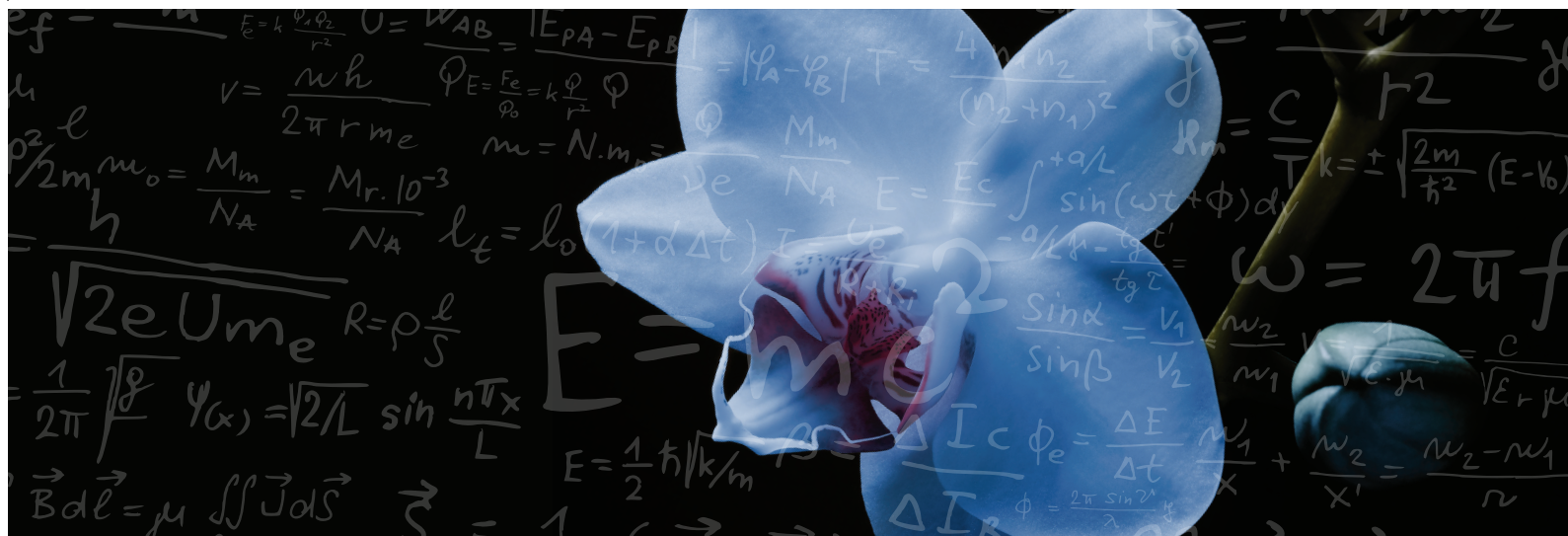

Наука. Результат. Доверие.

Syneron и Candela являются мировыми лидерами на рынке оборудования для эстетической медицины.

Мы одна компания с двумя разными брендами. Мы объединяем наши инновации, знания и понимание потребностей клиента на новом, превосходящем любую компанию в нашей отрасли, уровне.

Финансовая стабильность и большие ресурсы позволяют нашей компании предлагать пользователям широкий портфель доступных продуктов, лучшую мировую организацию службы сервиса и экспансивную всемирную сеть сбыта.

Вместе, мы лучше отвечаем требованиям рынка, чем когда-либо прежде. Мы знаем, как быстро внедрить новые и эффективные продукты для удовлетворения разнообразных потребностей пользователей.

Мы еще сильнее в прогнозировании тенденций рынка, чтобы поддержать наших клиентов и их пациентов. С новыми инновационными технологиями мы сохраним наше глобальное лидерство и продолжим помогать Вам расти в вашей практике.

Офисы Syneron - Candela и сеть дистрибьюторов распространены по всему миру.

SYNERON  CANDELA®

www.syneron-candela.com

